



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Beautifully Modello



Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν **Beautifully**. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί αυστηρότατες προδιαγραφές ποιότητας εγγυώνται πως η συγκεκριμένη επιλογή θα σας εξασφαλίσει ένα άριστο αποτέλεσμα χρήσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.




Πίνακας Ελέγχου – Περιγραφή

- | | |
|---------------|---|
| 1. Λειτουργία | Πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης |
| 2. Θέρμανση | Έλεγχος θερμοκρασίας (6 επίπεδα) |
| 3. Αναρρόφηση | Αναρρόφηση (6 επίπεδα) |

Τεχνικές Προδιαγραφές B-Modello

- | | |
|-----------------|--------|
| Ονομαστική Τάση | 5V |
| Μέγιστη ισχύς | 24W |
| Καθαρό βάρος | ~0,9kg |

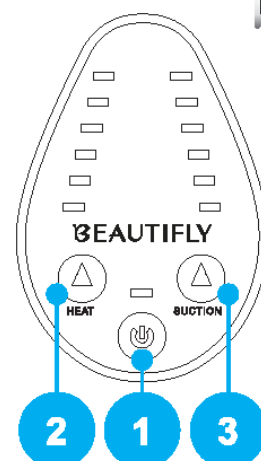

Μέθοδος Χρήσης

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη πριν τη χρήση.
- Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, καθαρίστε καλά το δέρμα και εφαρμόστε μια κρέμα, λάδι ή τζελ στα σημεία που θέλετε να κάνετε μασάζ.
- Για να αποφύγετε το εναπομείναν καλλυντικό προϊόν να περάσει στη συσκευή, πλύνετε τα χέρια σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι αποσυνδεδεμένος από την πρίζα όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη. Αν τον έχετε αποσυνδέσει, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Πιέστε το πλήκτρο “SUCTION” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναρρόφησης. Πιέστε ξανά το πλήκτρο “SUCTION” για να αυξήσετε την ένταση αναρρόφησης στο δέρμα (ένα ισχυρότερο επίπεδο αναρρόφησης επιτρέπει τη γρηγορότερη καταστροφή της κυτταρίτιδας).

Tip: Αφήστε το δέρμα να στεγνώσει λίγο πριν μετακινήσετε τη συσκευή, και αν έχετε ευαίσθητο δέρμα ξεκινήστε από το πιο χαμηλό επίπεδο αναρρόφησης.

- Πιέστε το πλήκτρο “HEAT” για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θέρμανσης. Για να αυξήσετε την ένταση της θέρμανσης πατήστε ξανά το πλήκτρο “HEAT” μέχρι να φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο σημείο του σώματος που θέλετε και κάντε μασάζ για από 5 έως 10 λεπτά (δείτε παρακάτω αναλυτικά τις τεχνικές μασάζ για κάθε σημείο του σώματος).
- Στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο ενεργοποίησης / απενεργοποίησης (1)
- Καθαρίστε καλά τη συσκευή και αποθηκεύστε τη σε ένα στεγνό μέρος.

Τεχνικές Μασάζ

Ώμοι

Τοποθετείστε τη συσκευή στους ώμους και μετακινήστε σε μια ευθεία γραμμή από το κάτω μέρος προς τα πάνω. Πραγματοποιήστε τις ίδιες κινήσεις καθώς μετακινήστε σε όλη την περιοχή των ώμων.



Πλάτη

Τοποθετείστε τη συσκευή στο κάτω μέρος της πλάτης και στη συνέχεια μετακινήστε τη προς τα πάνω σε ευθεία γραμμή. Πραγματοποιήστε την ίδια κίνηση και δίπλα μέχρι να καλύψετε όλη την πλάτη.

Κοιλιά

Κάντε μασάζ στην κοιλιά με κυκλικές κινήσεις με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Μπορείτε να κάνετε μασάζ στην κοιλιά και σε ευθείες γραμμές από κάτω προς τα πάνω, πάντα με φορά προς την καρδιά.

Μηροί / Πόδια

Το μασάζ θα πρέπει πάντα να γίνεται σε ευθείες γραμμές (από κάτω προς τα πάνω με φορά προς την καρδιά).

Γλουτοί

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε το μασάζ είτε με κυκλικές κινήσεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση είτε σε ευθείες γραμμές (από κάτω προς τα πάνω).

Χέρια

Κάντε μασάζ με κινήσεις σε ευθεία γραμμή (από κάτω προς τα πάνω).

Πόδια

Κάντε μασάζ από τη φτέρνα προς το πόδι.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, τα συγκεκριμένα μέρη του σώματος χαλαρώνουν και μειώνεται η ένταση. Η κυκλοφορία του δέρματος και των μυών βελτιώνεται. Κάντε μασάζ κάθε μέρα για τουλάχιστον 21 ημέρες για μόνιμα αποτελέσματα - σφριγηλό, λείο και καθαρό δέρμα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση: Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό της συσκευής αποσυνδέστε τη από την πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε ιδιαίτερα διαβρωτικά προϊόντα καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε υγρό πανί για να καθαρίσετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

1. Χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί για να καθαρίσετε τη συσκευή.
2. Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να την αποθηκεύσετε σε στεγνό και καθαρό μέρος κατά προτίμηση μέσα στη συσκευασία της.
3. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι τα τζάκια και σε μέρη με ηλιοφάνεια.
4. Να χειρίζεστε απαλά τη συσκευή όταν τη χρησιμοποιείτε. Αποφεύγετε να την πετάτε, να την πιέζετε και να τη χτυπάτε.



ΕΓΓΥΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή σας και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια των προϊόντων **BEAUTIFLY**. Η **BEAUTIFLY** είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο με μία διευρυμένη συλλογή τέτοια ώστε να καλύπτει με καλαισθησία, αλλά και αποτελεσματικότητα κάθε σας ανάγκη σε επαγγελματικό επίπεδο.

Κάθε συσκευή **BEAUTIFLY** έχει παραδοθεί σε σας έχοντας περάσει πολλαπλούς ελέγχους καλής λειτουργίας στο εργοστάσιο κατασκευής αλλά και στα εργαστήρια αναγνωρισμένων Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Η εγγύηση ισχύει για 6 (έξι) μήνες για επαγγελματική χρήση και για 2 (δύο) χρόνια για οικιακή χρήση από την ημερομηνία αγοράς με την προσκόμιση της απόδειξης. Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής σας (εργασία και ανταλλακτικά) σε περίπτωση που η βλάβη της οφείλεται σε πραγματικό ελάττωμα της συσκευής. Δεν καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και συσκευασίας της συσκευής σας από και προς το εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση ή κακό χειρισμό, από κακή χρήση του αγοραστή (πτώση, σπασίματα εξαρτημάτων), από πτώση ή αύξηση της τάσης του ρεύματος του δικτύου ηλεκτροδότησης, από ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα), από επέμβαση τεχνικών που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρία, από πλημμύρες, από κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες.

Δεν καλύπτονται ζημιές που πιθανόν να προκλήθηκαν από την συσκευή σε άλλες συνδεδεμένες σ' αυτήν, καθώς επίσης καμία απαίτηση αποζημίωσής σας για προβλήματα στην εργασία σας, που τυχόν προήλθαν από την μη εύρυθμη λειτουργία της συσκευής.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχτεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Η εγγύηση ισχύει μόνο όταν το προϊόν έχει αγοραστεί νομίμως συνοδευόμενο από παραστατικό αγοράς με υποχρέωση προσκόμισής του όταν αυτό ζητηθεί και εφόσον έχουν συμπληρωθεί από τον τελικό αγοραστή τα παρακάτω στοιχεία φέροντας υπογραφή και σφραγίδα του καταστήματος πώλησης προς αυτόν.

Αρ. Απόδειξης.....
Ημερομηνία Αγοράς.....
Τύπος Συσκευής:.....
Όνοματεπώνυμο Αγοραστή:.....
Κατάστημα Πώλησης:.....
Υπογραφή / Σφραγίδα

Με την Εγγύηση της

Κ.Α. ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σαπφούς 7-9, 10553 Αθήνα - Ελλάδα | Τηλ. +30 210 3737000 – Fax. +30 210 3737147

www.zazopouloussa.gr | zinfo@zazopouloussa.gr